

SOLO **RX**

De nieuwe standaard in veilig rijden



Ontdek
Reflex, met
actieve rem

Inspired by life

 **Life & Mobility**

De nieuwe standaard in veilig rijden



Mobiliteit draait om vrijheid. Zelf bepalen waar je naartoe gaat, op jouw manier. Toch kan er onderweg iets onverwachts gebeuren. Een plotselinge beweging. Iemand die oversteekt. Een situatie waarop je direct wilt reageren, zonder erbij na te denken. Juist dan wil je kunnen vertrouwen op je scootmobiel.

De Solo RX geeft je die zekerheid. Met de nieuwe rijbediening heb je altijd de volledige controle. Als je in een onverwachte situatie in een reflex de hendels inknipt, remt de scootmobiel direct. Net zoals op de fiets. Ook kun je tijdens het rijden gecontroleerd gasgeven en gemakkelijk bijremmen dankzij de actieve rem.

Dat geeft rust onderweg. En het vertrouwen dat je in elke situatie veilig en beheerst kunt blijven rijden; of je nu door druk verkeer gaat, moet uitwijken of plotseling moet stoppen. De Solo RX geeft het vertrouwen dat waar je ook naartoe wil, je er op de meest veilige manier komt.

Zo zou rijden met een scootmobiel altijd moeten voelen. Daarom noemen we de Solo RX: de nieuwe standaard in veilig rijden.

Veiliger rijden dankzij Reflex, met actieve rem

Met de Reflex rijbediening kun je de Solo RX besturen op een manier die logisch en vertrouwd voelt. Doordat gas geven en remmen van elkaar gescheiden zijn, houd je meer controle over je scootmobiel. Met de actieve remhendel rem je wanneer dat nodig is en corrigeer je je snelheid eenvoudig tijdens het rijden. Moet je onverwacht reageren? Dan kom je door beide hendels in te knijpen direct tot stilstand. Zo biedt Reflex meer controle, veiligheid en vertrouwen in elke situatie.



Reflex

Als elke seconde telt, reageert de Reflex rijbediening direct. Als je beide hendels tegelijk inknijpt, komt de Solo RX gecontroleerd tot stilstand. Net zoals op de fiets.



Veilig én comfortabel op pad met INDEGO

Het gepatenteerde INDEGO-veersysteem zorgt voor een comfortabele en stabiele rijervaring, ook op minder vlakke ondergronden en tijdens langere ritten.

- **Minder belasting voor je lichaam**
Rubberen vering dempt schokken en trillingen, waardoor je lichaam minder wordt belast.
- **Stabiël op elke ondergrond**
De wielen bewegen onafhankelijk van het frame. Zo blijft de scootmobiel stabiel rijden bij drempels en andere obstakels.
- **Af te stemmen op jouw voorkeur**
Kies voor een sportieve, comfortabele of extra geveerde rijervaring en stem het rijgedrag eenvoudig af op jouw wensen.



Actieve rem

Doordat de gas- en remhendel van elkaar gescheiden zijn, kun je met de actieve rem gecontroleerd afremmen tijdens het rijden. Dat geeft extra controle, bijvoorbeeld bij het afdalen van een helling, in druk verkeer of wanneer je nauwkeurig wilt manoeuvreren.



Dit maakt de Solo RX nog veiliger

Sterke motor Extra trekkracht bij het oprijden van stoepranden of hellingen. 	Snelheidscorrectie in bochten Past automatisch je snelheid aan voor meer stabiliteit. 	Auto-stop richtingaanwijzers Schakelen vanzelf weer uit na een bocht. 	Anti-rollback blokkeersysteem Voorkomt achteruit rollen op hellingen. 	Hoogwaardige spiegels Voor optimaal zicht rondom.
--	---	---	---	---

Met al het goede van de vertrouwde Solo

De Solo RX heeft veel instelmogelijkheden, waardoor je de scootmobiel volledig kunt afstemmen op je persoonlijke wensen en voorkeuren. Bovendien is de Solo RX standaard in vijf eigentijdse kleuren verkrijgbaar. Zo rijdt hij niet alleen geweldig, maar ziet hij er ook nog eens op z'n best uit.



Verkrijgbaar in vijf standaardkleuren of een RAL-kleur naar keuze



Veilig op weg, ook als het donker wordt

De krachtige ledkoplamp verlicht de weg voor je, terwijl de verlichting rondom ervoor zorgt dat je goed zichtbaar bent voor andere weggebruikers.



Verkrijgbaar in drie luxe edities

De Solo RX is ook verkrijgbaar in drie luxe special editions. Ga voor de stoere Black Edition, die de scootmobiel een strakke en moderne uitstraling geeft. Of de stijlvolle Blue Diamond met een mooie, blauwe kleur. Of kies voor de retro uitstraling van de Elegance. Alle luxe edities zijn

uitgevoerd met de nieuwe, intuïtieve Reflex rijbediening. Bovendien zijn veel van de luxe opties en accessoires ook onderling te combineren, zodat je de Solo RX helemaal naar jouw eigen smaak kunt samenstellen. Vraag je dealer naar de mogelijkheden.



SOLO BLACK EDITION




SOLO BLUE DIAMOND



SOLO ELEGANCE



Meer weten over de Solo RX?
Scan de QR-code voor video's en extra informatie.

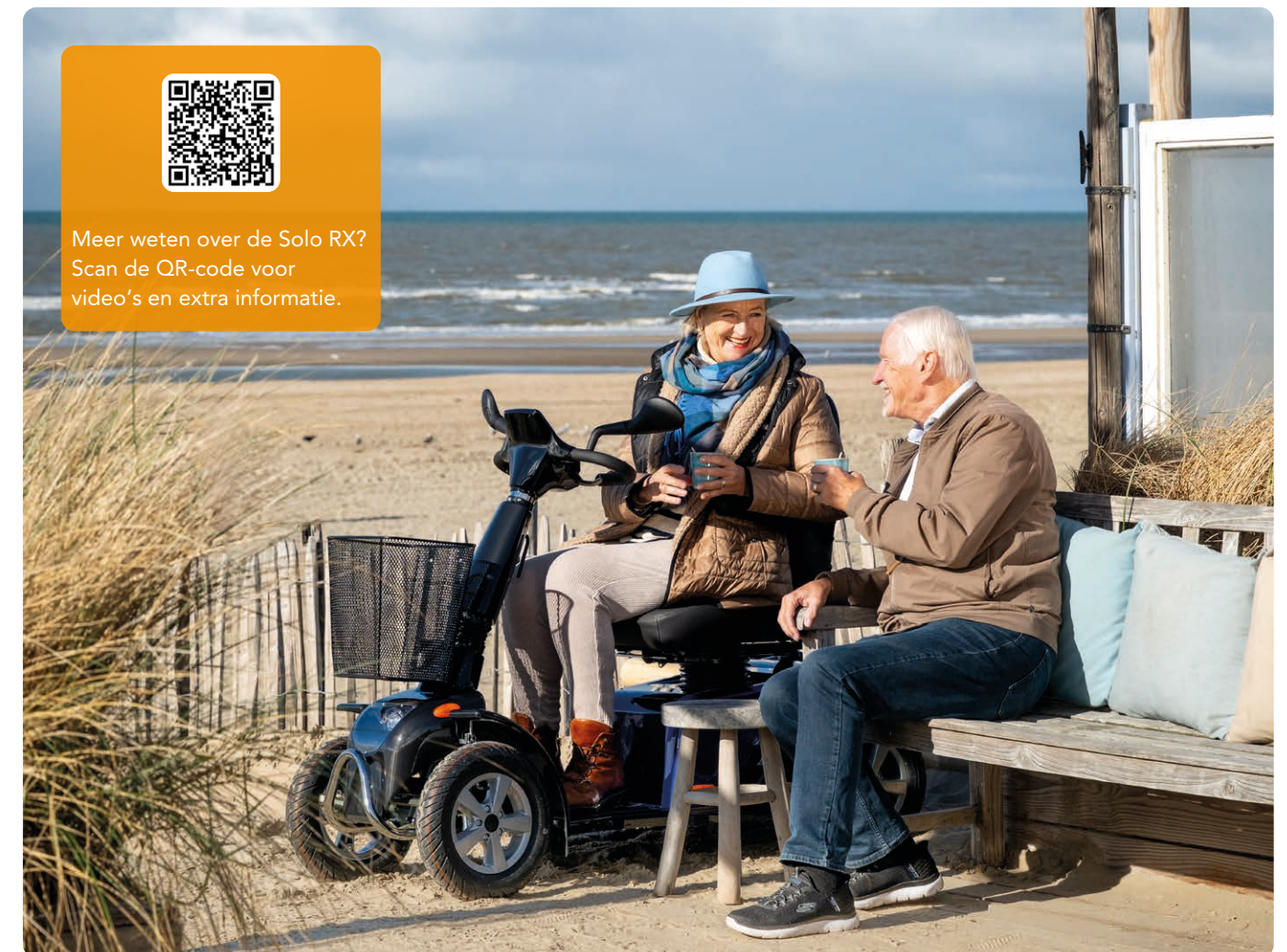

Specificaties	Solo RX 3-wiel*	Solo RX 4-wiel*
Hoogte scooter	120 cm	120 cm
Lengte scooter	140 cm	140 cm
Breedte scooter	64 cm	64 cm
Hoogte voetplateau	17 cm	17 cm
Zitbreedte	48-53-58 cm	48-53-58 cm
Zitdiepte	44 cm	48-54 cm
Zithoogte t.o.v. plateau	45-53 cm	45-53 cm
Maximum snelheid	19 km/h**	19 km/h**
Actieradius (Gel)	40/50/70 km**	35/45/65 km**
Accu (Gel)	60/73/97 Ah	60/73/97 Ah
Actieradius LITHIUM 8	70 / 140 km**	70 / 140 km**
Accu LITHIUM 8	80 Ah en 160 Ah	80 Ah en 160 Ah
Lader	6A/24V, 8A/24V, 12A/24V	6A/24V, 8A/24V, 12A/24V
Totaal gewicht (excl. accu's)	96 kg	105 kg
Maximaal draagvermogen	160 kg (optie 200 kg)	160 kg (optie 200 kg)
Draaistraal	140 cm	167 cm
Maximale hellingshoek	10 graden	10 graden
Wielmaat	3.00 - 16"	3.00 - 16"
Voldoet aan	EN 12184 klasse C	EN 12184 klasse C
Standaard kleuren	Sunset Orange, Cloud Grey, Royal Blue, Fresh Mint, Merlot Red	Sunset Orange, Cloud Grey, Royal Blue, Fresh Mint, Merlot Red

* Ook verkrijgbaar in Black Edition, Blue Diamond of Elegance uitvoering

** Afhankelijk van de ingestelde snelheid, buitentemperatuur, gewicht gebruiker, bandenspanning, etc.

Life & Mobility

PO Box 304
NL - 7000 AH Doetinchem
Logistiekweg 7
Doetinchem

T +31 (0)314 328 000
info@life-mobility.com
www.life-mobility.com

Jouw Life & Mobility scooterdealer

